
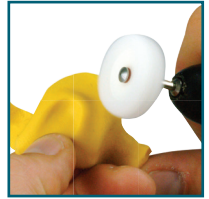
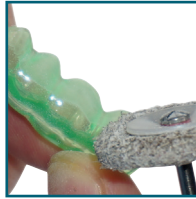


# Lisko

# Lisko-S

# Lisko-B

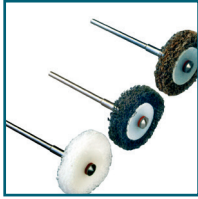

**Dentale Bereich:** Weichbleibende Unterfütterungen, Kunststoffe, Metalle und alle Tiefziehmaterialien.

**Orthopädischer Bereich:** Orthesen, Ballenschalen, Zwischenzehenkeile usw.

**Lisko, Lisko-S und Lisko-B** sind weiche, elastische Polierscheiben, ideal zum Beschleifen und Glätten von flexiblen Kunststoffen, Silikonen oder anderen weichbleibenden Materialien. Sie eignen sich auch zum Vorpolieren von Metall und anderen Kunststoffen. Die Scheiben passen sich flexibel den Konturen der zu bearbeitenden Oberfläche an. Sie zeichnen sich durch geringe Wärmeentwicklung aus, schmieren nicht und gewährleisten durch ständig frei werdende Schleifpartikel gleichbleibende Ergebnisse.

**Lisko** hat eine offene Struktur. Die grobe Körnung eignet sich zum Abtragen, die mittlere zum Abrunden der Kanten und die feine zum Glätten. **Max. Drehzahl 5000 U/Min.** Besonders bei feinen Körnungen mit geringem Druck schleifen. **Schutzbrille tragen.**

Lieferform: 10 Lisko Polierscheiben, Ø 28 mm, unmontiert, 4 Stützscheiben, 1 Mandrell

Korn	Best.-Nr.
fein, weiß	223 100
mittel, grau	223 101
grob, braun	223 102
sortiert	223 105

**Lisko-S** hat eine halboffene Struktur, mindestens die vierfache Lebensdauer von **Lisko weiß** und ermöglicht mit der feinen Körnung sowohl Abtragen, Abrunden und Glätten. **Idealer Drehzahlbereich 5000 - 10000 U/Min., Schutzbrille tragen.**

Lieferform: 10 Lisko-S Polierscheiben, Ø 28 mm, unmontiert, 4 Stützscheiben, 1 Mandrell


Korn	Best. Nr.:
fein, türkis	223 200

**Lisko-B** hat eine halboffene Struktur, mindestens die vierfache Lebensdauer von **Lisko braun** und ermöglicht mit der groben Körnung sowohl Abtragen, Abrunden und Glätten. **Idealer Drehzahlbereich 5000 - 10000 U/Min., Schutzbrille tragen.**

Lieferform: 10 Lisko-B Polierscheiben, Ø 28 mm, unmontiert, 4 Stützscheiben, 1 Mandrell

Korn	Best. Nr.:
grob, braun	223 300

Lisko, Lisko-S u. Lisko-B  
Großpackungen auf Anfrage

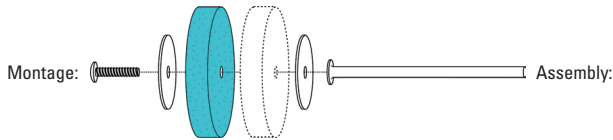

**Dental field:** Soft relines, resins, metals and all thermoforming materials.

**Orthopaedic field:** Orthoses, ball protection, wedge between the toes etc.

**Lisko, Lisko-S and Lisko-B** are soft, elastic polishing discs, excellently suited for grinding and smoothing flexible acrylics, silicones or other soft materials. They are also suited for prepolishing metal and other acrylics. The discs adapt flexibly to the contours of the surface which has to be worked. They distinguish by only small heat development, do not smear and ensure constant results due to particles which are polished off steadily.

**Lisko** has an open structure. The coarse grain size is suited for removal, medium for rounding off the edges and fine for smoothing. **Max. number of revs. 5000/min.** In case of fine grain size grind under low pressure only. **Wear protective glasses.**

Supplies: 10 Lisko polishing discs, Ø 28 mm, disassembled, 4 supporting discs, 1 mandrel

Grain size	Ref.
fine, white	223 100
medium, grey	223 101
coarse, brown	223 102
assorted	223 105

**Lisko-S** has a half-open structure, keeps at least four times longer than **Lisko white**, and despite its fine grain size it makes possible removal, rounding off and smoothing. **Ideal speed range 5000 - 10000 revs./min. Wear protective glasses.**

Supplies: 10 Lisko-S polishing discs, Ø 28 mm, disassembled, 4 supporting discs, 1 mandrel

Grain size	Ref.
fine, turquoise	223 200

**Lisko-B** has a half-open structure, keeps at least four times longer than **Lisko brown**, and despite its coarse grain size it makes possible removal, rounding off and smoothing. **Ideal speed range 5000 - 10000 revs./min. Wear protective glasses.**

Supplies: 10 Lisko-B polishing discs, Ø 28 mm, disassembled, 4 supporting discs, 1 mandrel



Grain size	Ref.
coarse, brown	223 300

Lisko, Lisko-S and Lisko-B  
economy by request.

# Lisko

# Lisko-S

# Lisko-B

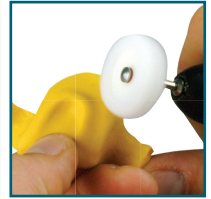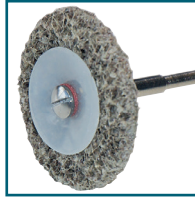

**Settore dentaire:** Rebasages souples, plastiques, métaux et tous les matériaux thermoformable.

**Settore ortopedico:** Orthèses, protection de l'éminence, coin entre les orteils etc.

**Lisko, Lisko-S et Lisko-B** sont des disques à polir souples et élastiques. Ils sont excellentement propre à polir et lisser les résines flexibles, les silicones ou d'autres matériaux souples. Ils se prêtent également à pré-polir du métal ou d'autres résines. Les disques s'adaptent dans une manière flexible aux contours de la surface à travailler. Ils se distinguent par un développement de chaleur bas, ne brouillent pas et garantissent des résultats constants à cause des particules qui sont rasées continuellement.

**Lisko** a une structure ouverte. Le grain gros est propre à aplanir, le grain moyen à arrondir les bords et le grain fin à lisser. **Nombre de rotations max. 5000 rev./min.** Polir sous pression faible, particulièrement en cas de grain fin. **Porter lunettes protectrice.**

Présentation: 10 disques à polir Lisko, Ø 28 mm, non-montés, 4 disques de support, 1 mandrin

Grain	Réf.
fin, blanc	223 100
moyen, gris	223 101
gros, brun	223 102
assortiment	223 105

**Lisko-S** a une structure demioouverte, au moins une durée quadruple de **Lisko blanc** et rend possible, malgré le grain fin, l'aplanissement, arrondissement et lissage. **Nombre de rotations idéal 5000 - 10000 rév./min. Porter lunettes protectrice.**

Présentation: 10 disques à polir Lisko-S, Ø 28 mm, non-montés, 4 disques de support, 1 mandrin


Grain	Réf.
fin, turquoise	223 200

**Lisko-B** a une structure demioouverte, au moins une durée quadruple de **Lisko brun** et rend possible, malgré le grain gros, l'aplanissement, arrondissement et lissage. Nombre de rotations idéal 5.000 - 10.000 rév./min. **Porter lunettes protectrice.**

Présentation: 10 disques à polir Lisko-S, Ø 28 mm, non-montés, 4 disques de support, 1 mandrin

Grain	Réf.
gros, brun	223 300

Lisko, Lisko-S et Lisko-B grandes boîtes sur demande

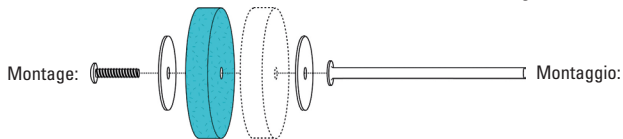

**Campo dentale:** ribasature morbide, resine, metalli e tutti i materiali per termoformatura.

**Campo ortopedico:** Protesi, protezione a palla, cunei per le dita dei piedi, ecc.

**Lisko, Lisko-S e Lisko-B** dischi per lucidatura morbidi ed elastici ,ottimamente adatto per la rifinitura e la lisciatura acrilici flessibili, siliconi e altri materiali morbidi. Sono inoltre adatti per la prelucidatura del metallo e di altri materiali acrilici. I dischi molto flessibili, si adattano ai contorni della superficie che si sta lavorando. Producono un basso surriscaldamento, non producono sbavature e garantiscono risultati costanti grazie alle particelle abrasive inglobate che vengono in continuazione rinnovate e portate sulla superficie di taglio.

**Lisko** ha una struttura aperta. La versione a granulometria grossolana è adatta per il taglio, arrotondamento dei bordi e quella fine per la rifinitura. Numero di **massimo giri. 5000/min.** In caso di Lisko a grana fine rifinire esercitando una bassa pressione. **Indossare sempre occhiali protettivi.**

Confezionamento: 10 Lisko dischi di lucidatura, Ø 28 mm, smontati, 4 flange di supporto, 1 mandrino

grana	N° rif.:
fine, bianco	223 100
medio, grigio	223 101
grossa, marrone	223 102
assortito	223 105

**Lisko-S** ha una struttura semi-aperta, dura almeno quattro volte più lungo di **Lisko bianco**, e nonostante la sua grana fine è possibile il taglio, la rifinitura e levigatura. **Velocità ideale 5000 - 10000 giri / min., indossare sempre occhiali protettivi.**

Confezionamento: 10 Lisko-S dischi di lucidatura, Ø 28 mm, smontati, 4 flange di supporto, 1 mandrino

grana	N° rif.:
fine, turchese	223 200

**Lisko-B** ha una struttura semi-aperta, dura almeno quattro volte più lungo di **Lisko marrone**, e nonostante la sua grana fine è possibile il taglio, la rifinitura e levigatura. **Velocità ideale 5000 - 10000 giri / min., indossare sempre occhiali protettivi.**

Confezionamento: 10 Lisko-B dischi di lucidatura, Ø 28 mm, smontati, 4 flange di supporto, 1 mandrino

grana	N° rif.:
grossa, marrone	223 300

Lisko, Lisko-S e Lisko-B A richiesta confezioni più grandi.