


DUOLOCK 30°

цилиндрический Т-образный замок

ZL- Microdent-Attachment GmbH & Co. KG

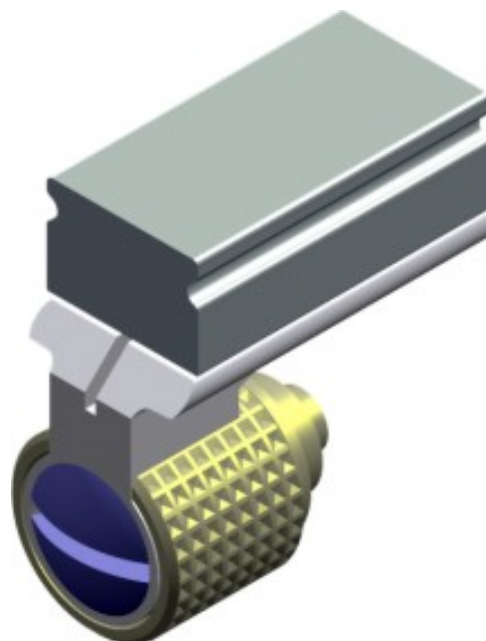


DUOLOCK - интракорональное замковое крепление с неподвижной фиксацией, имеет регулируемый активируемый винт в матрице. экстракорональное крепление матрицы с помощью винтового колпачка позволяет без проблем заменять матрицу, не повреждая пластмассу.

Т-замок DUOLOCK – это жесткий интракоронально устанавливаемый удерживающий элемент, который обеспечивает определенную удерживающую силу протеза за счет активируемого винта в матрице.

Экстракорональное свинчивание в матрице с винтовой крышкой позволяет простую замену матрицы без изменений в пластмассовом седле протеза.

Замки DUOLOCK могут использоваться с углами наклона в нижней части матрицы – 30° или 90°. Такая возможность выбора позволяет Вам использование данного вида замка при нормальном или атрофированном челюстном гребне.

	Инструмент для активации #373
	Параллелодержатель #354

ООО «Денталдепо ЛОТ»

394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д.60.

Тел./факс 8 4732 77-64-77, 71-49-54.

www.dentald.ru info@dentald.ru