

Anis Expert Фронтальные зубы



Фронтальные зубы Anis Expert имеют анатомическую форму и рельеф на вестибулярной поверхности.

Состоят из 4 слоев: шейка (1), дентиновое ядро (2), вестибулярная прозрачка (3) и язычная прозрачка (4).

Цвет шейки не контрастирует с цветом зуба, что позволяет оставлять шейки открытыми при необходимости.

Дентиновое ядро находится внутри прозрачек, что дает возможность свободно дорабатывать зубы с язычной стороны без боязни изменить цвет зуба или получить слишком прозрачный режущий край.



Режущий край имеет плавный переход из дентина в прозрачку и не просвечивается насквозь. Такое наслоение упрощает работу техникам при постановке, позволяя получить высокоэстетичный результат.

Точно попадают в цвет. Расположение слоев, их состав и цвет созданы таким образом, что зубы имеют глубину режущего края и при этом цвет зуба не тускнеет под прозрачкой.

Anis Expert Жевательные зубы




Жевательные зубы Anis Expert имеют анатомическую форму, при этом легки в постановке.

Состоят из 3 слоев: шейка (1), дентиновое ядро (2), прозрачка (3).

Расположение слоев, их состав и цвет созданы таким образом, что язычная сторона почти не отличается по цвету от вестибулярной и переход между слоями практически незаметен.

Выемка с обратной стороны зуба позволяет легко и быстро убрать лишний материал при постановке в съемные протезы при нехватке межальвеолярной высоты.

Увеличенная высота лингвальной поверхности зуба позволяет использовать их и для комбинированных работ.

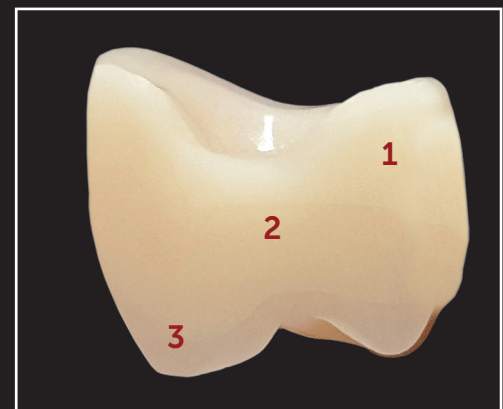

Материал в области вершин бугров замутнен и имеет большой объем, что дает много места для обработки зуба.

Прессование в 3 слоя под большим давлением позволяет добиться большей прочности зуба.