


# Церагум

## Силиконовые полиры для полировки керамики




Типичный случай применения силиконовых полиров: контурирование режущего края коронки после глазуровки.

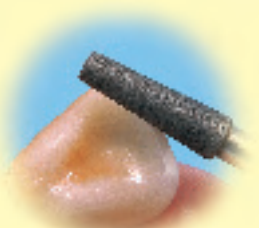

Грубый полир Церагум, имея высокую степень абразивности, легко удаляет шероховатости после обработки алмазным инструментом.



Церагум средней степени абразивности, удаляя следы обработки грубым полиром, помогает подготовить поверхность для окончательной полировки.

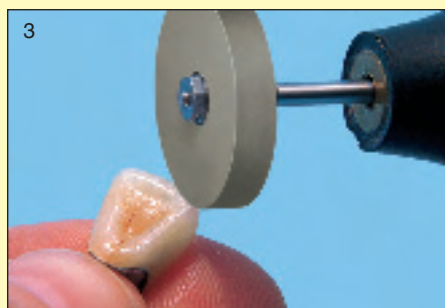

Сверхтонкий полир Церагум с абразивом очень мелкой зернистости. После обработки среднезернистым Церагумом позволяет быстро отполировать поверхность керамики до высокого зеркального блеска.

Для фиксации цилиндрических полиров рекомендуется применять спиральный держатель (№ д/зак 360 0116 7). Для форм «линза» и «диск» – держатель 2-го размера для быстрой смены инструмента.

Величина абразивного зерна трёх новых силиконовых полиров оптимально согласована между собой. Этот набор даёт возможность быстро отполировать керамическую поверхность до высокой степени зеркального блеска.

### Церагум грубый




Цилиндр 19 x Ø 6 mm

Линза 4 x Ø 22 mm

Диск 4 x Ø 22 mm

№ ISO	658 900 114532 060	658 900 303532 220	658 900 372532 220
Упаковка	№ д/зак	№ д/зак	№ д/зак
12 шт.	PWK G061 2	PLK G221 2	PRK G221 2
50 шт.	PWK G065 0	PLK G225 0	PRK G225 0
100 шт.	PWK G060 0	PLK G220 0	PRK G220 0

### Церагум средний

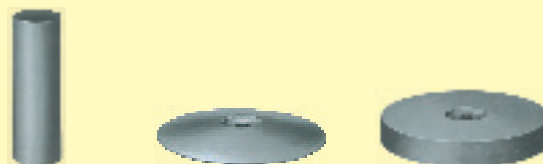

Цилиндр 19 x Ø 6 mm

Линза 4 x Ø 22 mm

Диск 4 x Ø 22 mm

№ ISO	658 900 114522 060	658 900 303522 220	658 900 372522 220
Упаковка	№ д/зак	№ д/зак	№ д/зак
12 шт.	PWK M061 2	PLK M221 2	PRK M221 2
50 шт.	PWK M065 0	PLK M225 0	PRK M225 0
100 шт.	PWK M060 0	PLK M220 0	PRK M220 0

### Церагум тонкий



Цилиндр 19 x Ø 6 mm

Линза 4 x Ø 22 mm

Диск 4 x Ø 22 mm

№ ISO	658 900 114502 060	658 900 303502 220	658 900 372502 220
Упаковка	№ д/зак	№ д/зак	№ д/зак
12 шт.	PWK F061 2	PLK F221 2	PRK F221 2
50 шт.	PWK F065 0	PLK F225 0	PRK F225 0
100 шт.	PWK F060 0	PLK F220 0	PRK F220 0

### Держатели

#### Спиральный держатель

№ ISO 312 104 610415 050

6 шт.

№ д/зак 360 0116 7



#### Держатель 2-го размера для быстрой замены инструментов

№ ISO 330 104 606050 050

10 шт.

№ д/зак 360 0115 3



ООО "РЕАЛДЕНТ"

www.realdentcom.ru